



i-gel[®] PLUS
i-gel[®] išsivystė



Kvėpavimo takų valdymas • Oro takams skirti gaminiai



i-gel® Plus

i-gel® Plus yra vienas svarbiausių laringinių kaukių konstrukcijos pasiekimų nuo tada, kai 2007 m. buvo pristatytas originalusis i-gel®. Jame sujungtos visos standartinio i-gel® ir i-gel® O₂ savybės ir privalumai, o taip pat ir keletas esminių gaminio patobulinimų, padedančių pagerinti našumą ir saugą bei optimizuoti naudojimo patogumą.

Originalusis i-gel® ne tik pakeitė supratimą apie tai, kaip turėtų atrodyti laringinė kaukė, bet ir apie tai, ko galima tikėtis jo veikimo požiūriu.

Daugiau nebereikia daryti kompromisų. i-gel® užtikrina geresnį sandarinimo slėgį, mažą pooperacinių komplikacijų skaičių ir didelę pirmojo įvedimo sėkmę. Visa tai pasiekama prietaisu, kuris, daugelio nuomone, yra paprastesnis ir lengviau įvedamas bei naudojamas. Be to, standartinėje komplektacijoje yra skrandžio kanalas (išskyrus 1 dydį).

Paprastai tai būdavo būdinga labiau specializuotiems prietaisams, o i-gel® buvo sukurtas kaip kasdieniam naudojimui skirtas prietaisas, užtikrinantis didesnį skrandžio kanalo saugumą kiekvienam pacientui. i-gel® Plus tai patobulintas originalusis i-gel®, kad kvėpavimo takų specialistai galėtų naudotis dar pažangesnėmis laringinėmis kaukėmis.


i-gel® Plus - gaminio patobulinimai

Didesnis skrandžio kanalas pacientų saugumui padidinti

Skrandžio kanalo skersmuo padidintas siekiant optimizuoti regurgituojančio skysčio valdymą, kad būtų galima įstatyti didesnį atsiurbimo vamzdelį, sumažinti aspiracijos riziką ir padidinti paciento saugumą.

Didžiausias atsiurbimo vamzdelio dydis, kurį galima įvesti į skrandžio kanalą kiekvieno dydžio i-gel® Plus, palyginti su standartiniu i-gel®, parodytas toliau pateiktoje lentelėje.


Gaminio dydžiai	Standartinis i-gel®	i-gel® Plus
3	12F	16F
4	12F	18
5	14F	18F

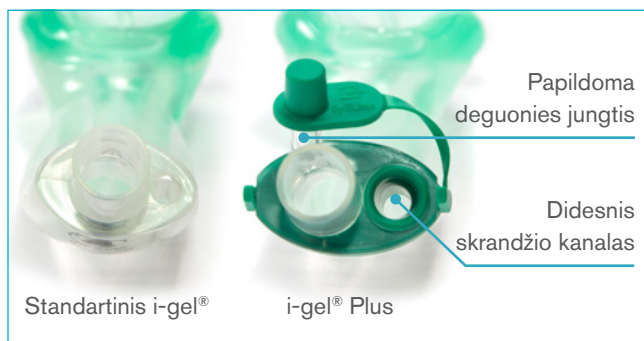

Prietaisas turi tas pačias funkcijas, kurios jau buvo įdiegtos į i-gel® O₂ viršgerklinį vamzdelį. Papildoma deguonies jungtis, skirta pasyviai deguonies tiekimui pagal kardiocerebrinio gaivinimo (CCR) protokolą, ir hook žiedas, skirtas naudoti su specialiai sukurtu kvėpavimo takų palaikymo dirželiu (galima įsigyti atskirai), kad būtų galima naudoti alternatyvų prietaiso tvirtinimo būdą.


Nauja intubacijos rampa, skirta optimizuoti intubacijos kanalo naudojimą

Kvėpavimo takų kanale, kur kanalas išeina į nepripučiamą manžetę, yra intubacijos rampa, padedanti užtikrinti, kad kai prietaisas naudojamas kaip intubacijos kanalas (su fibrooptine kontrole), trachėjos vamzdelis išeina iš i-gel® Plus optimaliu kampu, kad patikimai ir saugiai prasiskverbtų pro balso stygas ir patektų į trachėją.

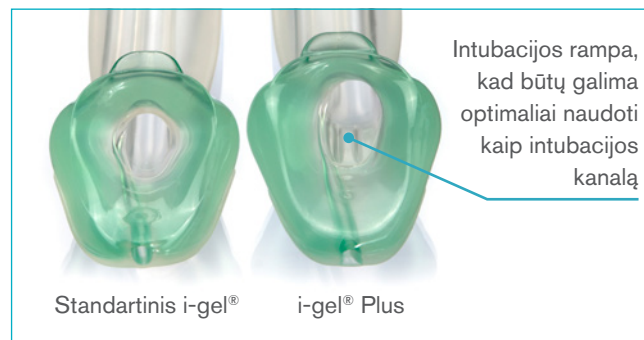

Ilgesnė manžetė stemplės sandarumui pagerinti

i-gel® Plus manžetės galas šiek tiek pailgintas. Tai gali padėti padidinti stemplės sandarumą ir kartu su didesniu skrandžio kanalu užtikrinti geresnę apsaugą nuo aspiracijos.

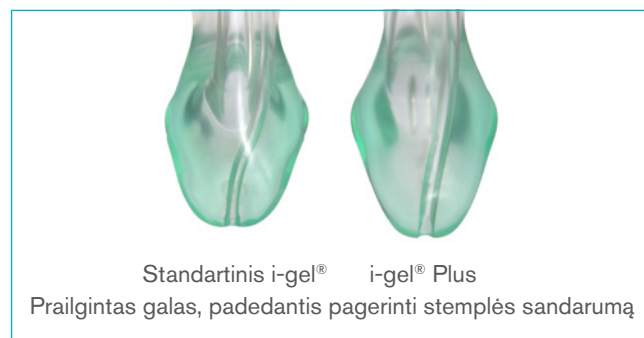



i-gel® Plus savybės ir privalumai

15mm jungtis

Patikimas prijungimas prie bet kokios standartinės paciento jungtelės ar jungties

Spalvotas hook žiedas

Pritvirtinti i-gel® Plus su kvėpavimo takų fiksavimo dirželiu

Proksimalinis skrandžio kanalo galas

Aiškiai matoma pagrindinė gaminio informacija

Greita ir lengva nuroda. Pateikiamos dydžio ir svorio rekomendacijos

Pozicijos rekomendacijos

Papildoma deguonies jungtis

Skirta pasyviam deguonies tiekimui, kuris yra kardiocerebrinio gaivinimo (CCR) sudedamoji dalis

Skrandžio kanalas

Didina pacientų saugumą, nes galima valdyti regurgituojančius skysčius

Integruotas sukandimo blokatorius

Sumažina kvėpavimo takų kanalų užsikimšimo galimybę

Burnos ertmės stabilizatorius

Palengvina įvedimą ir pašalina sukimosi galimybę

Didelis skrandžio kanalas

Kad būtų galima įvesti didesnį atsiurbimo vamzdelį

+ i-gel® Plus papildomas privalumas

Intubacijos rampa

Optimizuoti intubacijos kanalo naudojimą

+ i-gel® Plus papildomas privalumas

Ilgesnis manžetės galas

Padedą pagerinti stemplės sandarumą

+ i-gel® Plus papildomas privalumas


Antgerkliaus blokatorius

Neleidžia antgerkliui nusileisti žemyn ar uždengti distalinę kvėpavimo takų angą

Neišpučiama manžetė

Nereikia pripūsti manžetės po įvedimo, todėl ją galima lengvai ir greitai įvesti

Distalinė skrandžio kanalo dalis

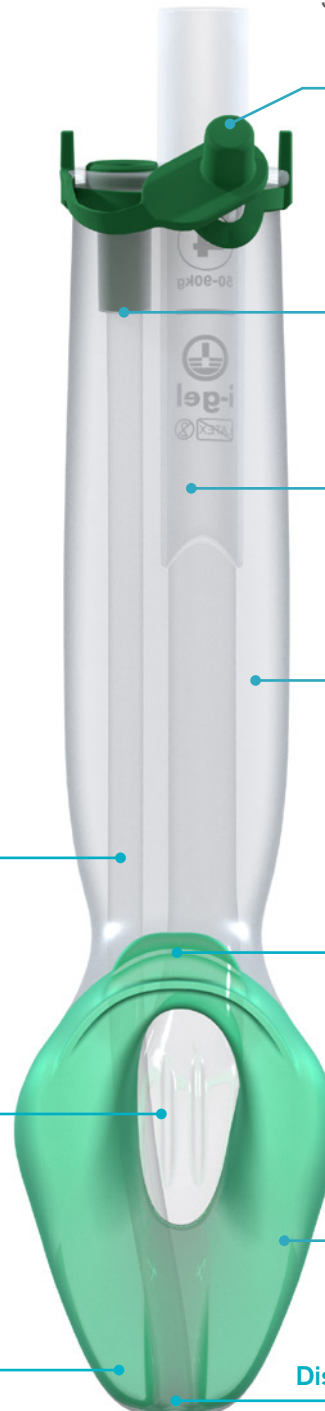

Kvėpavimo takų inovacijos nuo 2007 m.

2007 m. pradėtas gaminti originalus i-gel® prietaisas yra novatoriškas antros kartos Intersurgical viršgerklinis kvėpavimo takų prietaisas su nepripučiamą manžete. i-gel® - pirmasis unikalus patobulinimas po standartinių laringinių kaukių, pakeitęs kvėpavimo takų valdymą ir dabar plačiai naudojamas anestezijoje ir reanimacijoje visame pasaulyje. i-gel® pavadinimas kilo iš inovatyvios minkštos, į gelį panašios medžiagos, iš kurios jis pagamintas. Novatoriškas šios medžiagos pritaikymas leido sukurti unikalią nepripučiamą manžetę. Tai reiškia, kad prieš įvedant nereikėjo išpūsti manžetės, o įvedus - pripūsti, kad būtų užtikrintas sandarumas, todėl sutrumpėjo ir supaprastėjo paruošimo ir įvedimo procedūra. i-gel® Plus yra naujausias i-gel® asortimento papildymas ir, ko gero, vienas pažangiausių kada nors sukurtų laringinių kaukių.



i-gel® Plus

- Didesnis skrandžio kanalas - galima įvesti didesnį atsiurbimo vamzdelį
- Intubacijos rampa - optimizuoja kanalo naudojimą intubacijos metu
- Ilgesnis manžetės galas - padeda pagerinti stemplės sandarumą

Užsakymo informacija

i-gel® Plus yra trijų dydžių suaugusiems. Kiekvienas prietaisas tiekiamas sterilus permatomoje standžioje pakuotėje. Ši unikali pakuotės konstrukcija užtikrina prietaiso apsaugą tiek transportuojant, tiek sandėliuojant. i-gel® Plus tiekiamas dėžutėse po 10 vienetų.



Gaminio kodas	Aprašymas	Spalva	Dydis	Svoris	Kiekis dėžėje
8605000	i-gel® Plus viršgerkinis vamzdelis	Orange	5	Didelio dydžio suaugusiems 90+kg	10
8604000	i-gel® Plus viršgerkinis vamzdelis	Green	4	Vidutinio dydžio suaugusiems 50–90kg	10
8603000	i-gel® Plus viršgerkinis vamzdelis	Yellow	3	Mažo dydžio suaugusiems 30–60kg	10

Kvėpavimo takų fiksavimo dirželis

Intersurgical i-gel® kvėpavimo takų fiksavimo dirželis buvo sukurtas naudoti kaip alternatyvų arba papildomas metodas i-gel® Plus arba i-gel® O₂ (prietaisai su integruotu hook žiedu) tvirtinimui. Kvėpavimo takų fiksavimo dirželis įeina į i-gel® O₂ Resus Pack komplektą ir gali būti įsigytas atskirai, kad jį būtų galima naudoti su i-gel® Plus, dėžutėse po 10 vienetų.

Gaminio kodas	Aprašymas	Dydis	Kiekis dėžėje
8800000	Kvėpavimo takų fiksavimo dirželis	Suaugusiems	10

[Pateikti užklausa](#)
[Sužinokite daugiau](#)
[Žiūrėkite vaizdo medžiagą](#)

Sterilus

IS6.20 LT • Issue 4 06.24



UAB Intersurgical, Amionių g. 60, LT-18170, Pabradė, Lietuva
Tel: +370 387 66611 sales@intersurgical.lt www.intersurgical.lt



Gamintojas Intersurgical Ltd yra sertifikuotas pagal ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ir MDSAP

Pagalvokite prieš spausdindami
Taupykite energiją ir popierių.
Jei turite atspausdinti šią žinutę, naudokite dvipusį spausdinimą.

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA